


フットマッサージャー 品番 HER-FA501

家庭用

このたびは、フットマッサージャーをお買い上げいただき、ありがとうございました。
この取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。
医療機器のため、必ず「安全上のご注意」をお読みください。お読みになったあとは、いつでも取り出せるところに保証書とともに大切に保管してください。

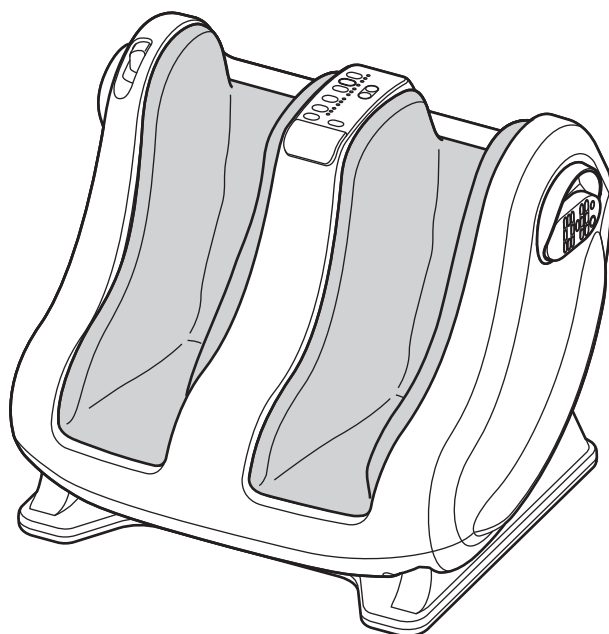

も く じ (ページ)

安全上のご注意	1～4
各部のなまえとはたらき	5～6
ご使用前に	7
使いかた	8～11
マッサージが終わったら	12
お手入れのしかた	12
故障かな?と思ったら	13
仕様	14
保証とアフターサービス	裏表紙

上手に使って上手に節電

この商品を使用できるのは日本国内のみで、
国外では使用できません。

This appliance is designed for domestic use in Japan
only and cannot be used in any other country.

ご愛用者登録について

下記のURLより愛用者登録及びアンケートのご記入をお願いします。

<http://www.e-life-sanyo.com/support/user.html>

安全上のご注意

どの項目も大切な内容です。
必ずお守りください。

- ※ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ※ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を、「警告」、「注意」に区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

	警告 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。
	注意 人が傷害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される内容。

絵表示の例

	○記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近くに具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。
	●記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください)が描かれています。

■お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

警告

医師の治療を受けているときや次のような人は必ず医師とご相談の上ご使用ください。


- ペースメーカーなど電磁障害の影響を受けやすい体内植込型医用電子機器を使用している人
 - 悪性しゅよう(腫瘍)のある人
 - 心臓に障害のある人
 - 温度感覚喪失が認められる人
 - 生理中の人や妊娠中または出産直後の人
 - 糖尿病などによる高度な末しょう(梢)循環障害による知覚障害のある人
 - 皮膚に創傷のある人
 - 安静を必要とする人
 - 体温38℃以上(有熱期)の人
例：急性炎症症状[けん(倦)怠感、悪寒、血圧変動など]の強い時期。
衰弱しているとき。
 - 骨粗しょう(鬆)症の人、せきつい(脊椎)の骨折、ねんざ(捻挫)、肉離れなど、急性[とう(疼)痛性]疾患の人
 - かつて治療を受けたところまたは疾患部へ使用する人
- 事故やケガ・体調不良を起こす原因になります。



強制

電源は交流100V専用コンセントを使用してください。
火災や感電の原因になります。

ご使用前には、必ず布カバーの布地が破れていないか確認してください。
どんな小さな破れでも、ただちに使用を中止し、電源プラグを抜いて、
修理をご依頼ください。
布地が破れた状態で使用するとケガや感電のおそれがあります。

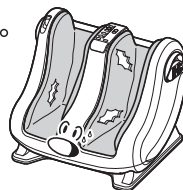

リクライニングするときは、必ず周囲に人やペットがいないこと、障害物がないことを
確認してください。
ケガをすることがあります。

使用後は必ず運転を切り、リクライニングを戻し、マッサージ部をロック状態にしてください。
子供のいたずらによる事故やケガのおそれがあります。

警告

次のような人はやけどのおそれがありますので使用しないでください。

- 温度や痛みの感覚の弱い人
- 自らの意思で足を動かさない人

医師からマッサージを禁じられている人は使用しないでください。

例：血栓〔そく（塞）栓〕症、重度の動脈りゅう（瘤）、急性静脈りゅう（瘤）、各種皮膚炎、皮膚感染症（皮下組織の炎症を含む）など


自分で意思表示ができない人や自分で操作できない人には使用させないでください。事故やケガをするおそれがあります。

子供に使わせないでください。また、使用中は子供を近づけないでください。事故やケガをするおそれがあります。

足裏・ふくらはぎのマッサージ用ですので、頭部や胸部、腹部、関節部（ひざ・ひじなど）への使用はしないでください。気分が悪くなったり、事故やケガをするおそれがあります。



本体の上に立ったり、座ったりしないでください。故障や事故・ケガの原因になります。

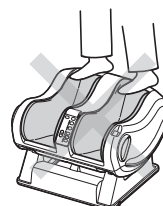


本体のすき間に手や足などを入れないでください。ケガをするおそれがあります。

足裏指圧部に、足を強くあてないでください。故障や事故・ケガの原因になります。



右図の向きに足を入れないでください。事故やケガの原因になります。

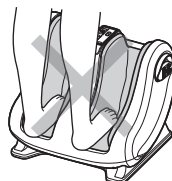

低温やけどのおそれがありますので、長時間の使用はしないでください。




禁止

安全上のご注意 (つづき)

どの項目も大切な内容です。
必ずお守りください。

警告

 禁止	コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引張ったり、ねじったり、たばねたりしないでください。また重い物を載せたり、挟み込んだりしないでください。 コードが破損し、火災・感電の原因となります。
	コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しないでください。 感電・ショート・発火の原因になります。
	コードを本体に巻きつけないでください。 コードに無理な力が加わり破損し、火災や感電の原因になります。
 分解禁止	改造しないでください。修理技術者以外の方は、分解や修理をしないでください。 火災・感電や事故・ケガの原因となります。修理はお買い上げの販売店またはお近くの「お客さまご相談窓口」(別紙)にご相談ください。
 電源プラグを抜く	お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。 また、ぬれた手で抜き差ししないでください。 感電や事故・ケガをすることがあります。

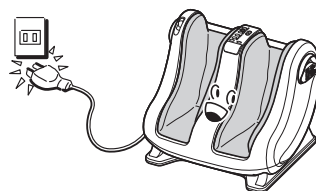

注意

 強制	ご使用前には、この取扱説明書にしたがってスイッチなどが正常に動作することを確認してください。
	電源プラグは確実に最後まで差し込んでください。 感電・ショート・発火の原因になります。
	使用中、身体に異常を感じたときはただちに使用を中止し、医師に相談してください。 そのまま使用を続けると思わぬ事故やケガにつながるおそれがあります。
	1回の使用は15分以内にしてください。また、同一箇所への連続使用はさけてください。 長時間の連続使用は、必要以上の刺激となり逆効果やケガの原因となります。
	動かなくなったり異常がある場合は、事故防止のため、すぐに電源プラグを抜いて、お買い求めの販売店に必ず点検・修理をご依頼ください。 感電や漏電・ショートなどによる火災のおそれがあります。
	電源プラグを抜くときは、コードを持たずに必ず先端のプラグを持って引き抜いてください。また、電源プラグのほこりなどは定期的にとってください。 感電やショートして発火することがあります。



⚠ 注意

 強制	長期間使用しなかった場合はご使用前に、正常にかつ安全に作動することを確認してください。またコードなどに異常のないことを確認してください。事故やケガの原因になります。 使用後は汚れを取り、湿気の少ないところに保管してください。ほこり・湿気がたまると火災や感電・故障の原因となります。
 禁止	足裏・ふくらはぎのマッサージ以外の目的には使用しないでください。故障や事故・ケガの原因になります。 コードを持って本体をぶら下げたり、振り回したりしないでください。また、コード側を下にして本体を立てないでください。コードの断線事故の原因になります。 本体に水やお茶などをこぼしたり、強い衝撃を与えないでください。火災や感電・故障の原因になります。ただちに使用を中止して販売店で点検を受けてください。 他の治療器と同時に使用しないでください。気分が悪くなったり、体調不良を起こすおそれがあります。 ふとんの中や、毛布などをかぶせて使用しないでください。発火や本体内部の温度が高くなる原因になります。 指圧部が移動する溝に指を入れないでください。事故やケガの原因となります。 足のサイズが21cm未満の人は使わないでください。事故やケガの原因となります。 自分の足サイズよりも大きな足サイズ設定で使用しないでください。事故やケガの原因となります。
 水場での使用禁止	浴室など湿気の多い場所では使用しないでください。火災や感電および故障の原因になります。
 電源プラグを抜く	長期間使用しないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。絶縁劣化による感電や漏電火災の原因になります。 停電のときはただちに電源プラグをコンセントから抜いてください。復帰したときに、事故やケガのおそれがあります。 

お 願 い

- ・ 使用しても効果が現れない場合、医師または専門家にご相談ください。
- ・ 本製品を廃棄するときはお住まいの市区町村の指導に従って処分してください。環境汚染のおそれがあります。

各部のなまえとはたらき

本 体

リクライニングボタン

ボタンを押してロックを解除すると、マッサージ部をリクライニングすることができます。

エアバッグ

マッサージ部

温熱(ヒーター)部

コード

電源プラグ

受信部

操作部

足裏指圧部

台座

布カバー:抗菌防臭加工

試験機関:(財)日本紡績検査協会
試験方法:JIS L 1902 菌液吸収法
抗菌の方法:繊維に練り込み
試験結果:99%抑制
※取りはずしできません。

取っ手

持ち運びするときは、この部分を持ちます。また、リモコンを収納することもできます。

リモコン

付 属 品



リモコン(1個)



リチウム電池(1個)
[CR2032]

電池は工場出荷時に同梱していますので、自己放電のため寿命が短くなっている場合があります。

操 作 部

非常時停止ボタン

非常時
停止

運転
入/切

運転入/切ボタン

血行促進(指圧中心) ●
くつろぎ(もみ中心) ●
クイック(短縮) ●
足 裏 ●
ふくらはぎ ●
ほぐし ●

自動

3D指圧

自動コース選択ボタン

手動

手動選択ボタン

強 ●
中 ●
弱 ●
高め ●
低め ●
27.0~
23.5~26.5 ●
21.0~23.0 ●

強さ

強さ調節ボタン

温熱

温熱調節ボタン

足サイズ

足サイズ調節ボタン

SANYO HER-FA501


足裏指圧位置調節ボタン

足裏ポイント
前
後


リモコン

非常時停止ボタン

送信部

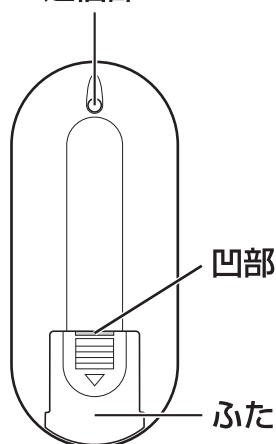

<裏面>

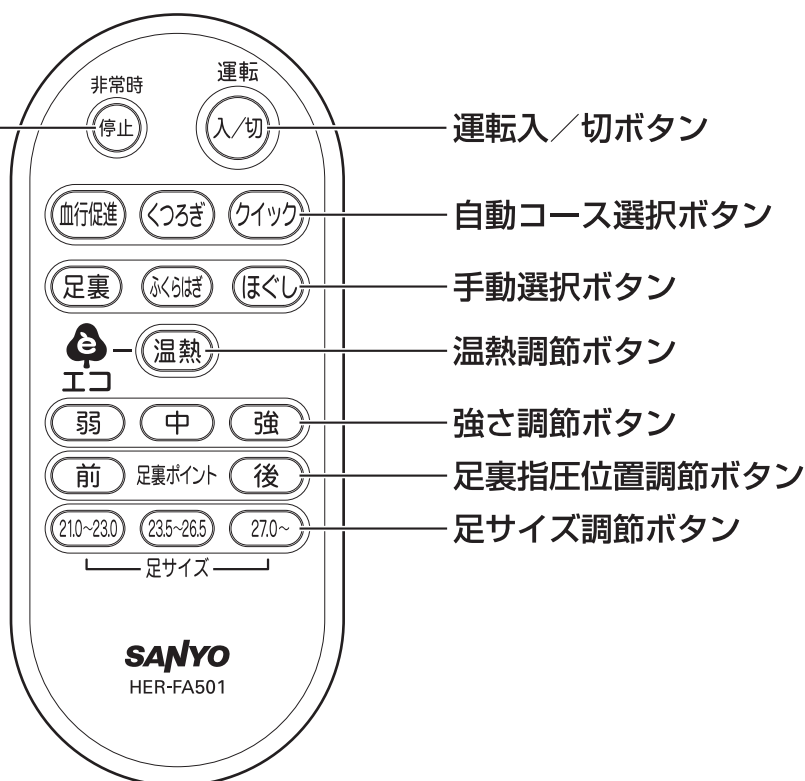

運転入/切ボタン

自動コース選択ボタン

手動選択ボタン

温熱調節ボタン

強さ調節ボタン


足裏指圧位置調節ボタン

足サイズ調節ボタン

リモコンの電池の入れかた／はずしかた

電池の入れかた


- ①ふたを押さえながらずらしてはずします。

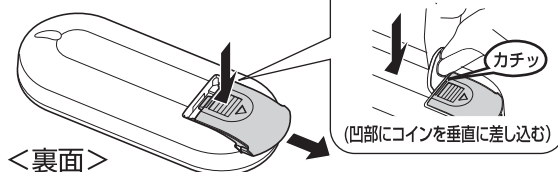


<裏面>

電池のはずしかた

- 細い棒（金属以外）を穴に差し込み、電池を持ち上げて取り出します。

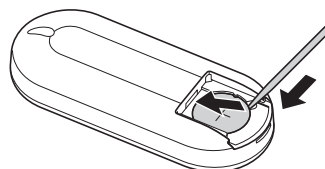

- ②電池を傾けながら確実に入れます。

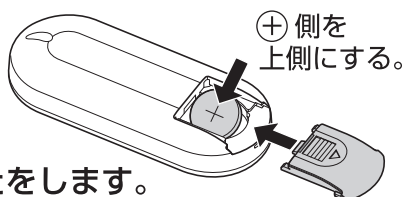

- ③ふたをします。

お願い

- 極性の $\oplus$ $\ominus$ を間違えないように正しく入れてください。
- 交換用のリチウム電池は、CR2032をお買い求めください。
- 動作しにくくなった場合は、新しい電池と交換してください。



注意

リチウム電池は、幼児の手の届かない所に置いてください。
万一飲み込んだ場合は、直ちに医師にご相談ください。

ご使用前に


1 使用場所を決めます。

- 本体を安定した場所に置いてください。
- テレビやラジオなどのAV機器から1m以上離してください。雑音が入ることがあります。

2 布カバーを確認します。


- ご使用前には、必ず布カバーの布地が破れていないか確認してください。どんな小さな破れでも、修理をご依頼ください。布地が破れた状態で使用するとケガや感電のおそれがあります。

3 電源プラグをコンセントに差し込みます。

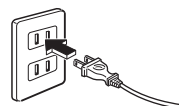


4 本体に足をのせます。

- 図のようにかかとを本体後側に当ててください。

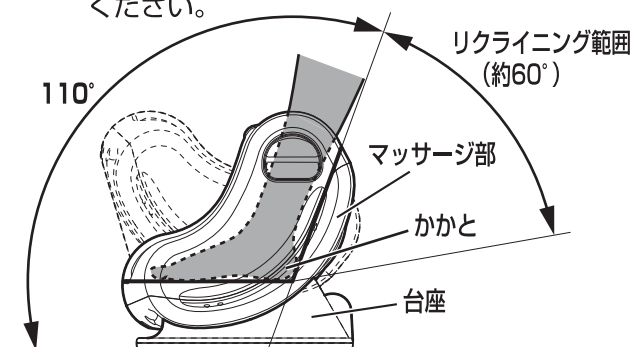

- リクライニングボタンを押して、ロックを解除し、マッサージ部をお好みの角度にリクライニングします。
- リクライニングを元の位置に戻すと、マッサージ部はロック状態になります。(この位置以外はロックしません。)

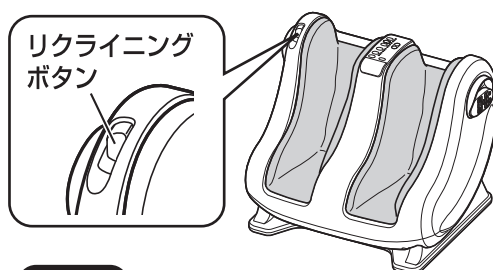


お願い

- リクライニングボタンを押す前に本体をリクライニングさせないでください。無理な力が加わり、故障の原因となります。




下図の向きに足を入れないでください。

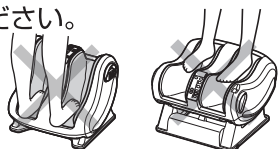

使用例


椅子に座って使用するとき

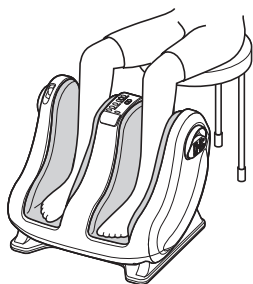


お願い

- キャスター付きの椅子に座って使用しないでください。ケガをするおそれがあります。

ソファに座って使用するとき

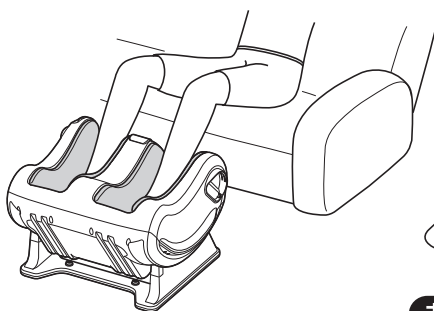

床に寝転がって使用するとき

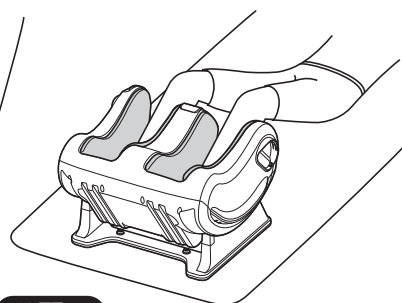


お願い

- ひざを軽く曲げた状態で使用してください。

リモコンの使いかた

リモコン裏面の送信部を本体受信部に向けてボタンを押します。

- 本体が受信できる範囲は受信部正面（中心）から前後・左右方向ともに約20°です。正面（中心）から離れるほど、受信しにくくなります。

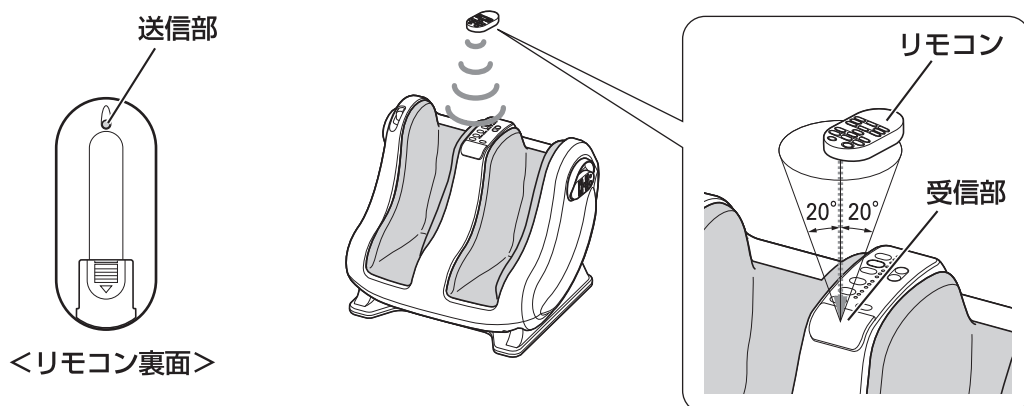


お願い

- 送信部や受信部を手や物でふさがないようにください。リモコンで操作できないことがあります。
- 受信部に直射日光が当たったり、インバーター照明器具および電子瞬時点灯照明器具を使用している部屋では、リモコンで操作ができないことがあります。操作ができない場合は、本体操作部でご使用ください。
- リモコンを踏んだり、落としたり、水をかけないようにください。破損・故障の原因になります。
- 本機のリモコンで他のリモコン付フットマッサージャーも動作することがありますので、送信部を他のフットマッサージャーに向けて操作しないようにください。

リモコンで操作をしないときは、リモコンを取っ手（リモコンホルダー）に収納してください。


※左右どちらの取っ手にも収納することができます。

リモコンのボタンを外側に向けてリモコンホルダーに取り付けます。

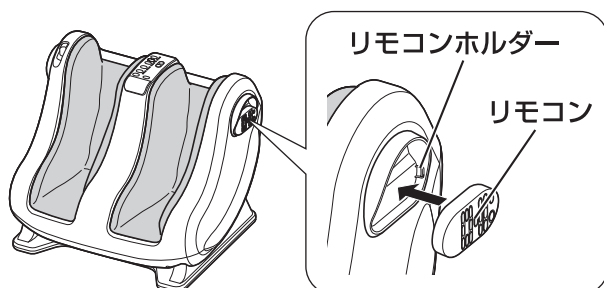

お願い


- ボタンを内側にして取り付けないでください。破損・故障の原因になります。

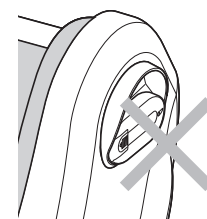

使いかた (つづき)

1 運転入／切ボタンを押します。

- ボタンを押すと、本体操作部の強さランプの「中」と温熱ランプの「エコ」(緑)と足サイズランプの「23.5~26.5」が点灯し、初期状態になります。
(ヒーターは、予熱状態になります。)
- 足裏指圧部がつま先の位置にない場合は、足裏指圧部がつま先の位置に移動して停止します。
(移動中はふくらはぎランプが点滅します。この間は、非常時停止ボタン以外のボタンは受け付けません。)

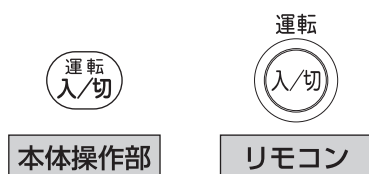

2 温熱調節ボタンを押して、温熱の調節をします。

- 温熱調節ボタンを押すごとに温度が矢印のように切り換わり、本体操作部のランプで表示します。
(ヒーターが「入」のときは本体操作部のランプが点灯します。)



■ 足裏が温かく感じられない場合 ■

※冬場など室温が低い場合は、温くなるまでに時間がかかったり、温かく感じられないことがあります。
マッサージ前に予熱することをおすすめします。

※初期状態では、「エコ」に設定されていますので、さらに高い温度をお好みの場合は、「高め」でご使用していただくことをおすすめします。



運転入／切ボタンを押した直後の室温に応じて、ヒーターの温度を自動的に設定します。

【室温が高い場合・・・ヒーター温度 低】
【室温が低い場合・・・ヒーター温度 高】

※エコモード使用時、消費電力を15%削減 (高めモードとの比較：室温25℃時)

3 足サイズ選択ボタンを押して、足のサイズを選びます。

- 設定した足のサイズに合わせてマッサージを行ないます。（くつのサイズを参考にしてください。）

本体操作部

足サイズ

- 足サイズ選択ボタンを押すごとに足のサイズが矢印のように切り換わり、本体操作部のランプで表示します。



リモコン

(21.0~23.0) (23.5~26.5) (27.0~)
足サイズ

- 足サイズ選択ボタンを押すと本体操作部のランプが点灯します。

お願い

- マッサージの途中で足サイズを変更しないでください。



注意

- 足のサイズが21cm未満の人は使わないでください。
- 自分の足サイズよりも大きな足サイズ設定で使用しないでください。


4 お好みのマッサージボタンを押します。

自動コース：足裏・足の側面・ふくらはぎを自動的にマッサージします。

本体操作部

自動

- 自動コース選択ボタンを押すごとに運転が矢印のように切り換わり、本体操作部のランプで表示します。

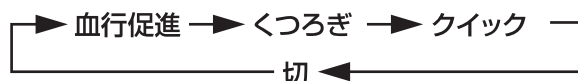

血行促進	しっかりした指圧中心のマッサージ (約15分)
くつろぎ	やわらかなもみ中心のマッサージ (約15分)
クイック	指圧中心の短時間マッサージ (約5分)

リモコン

(血行促進) (くつろぎ) (クイック)


- お好みの自動コース選択ボタンを押すと本体操作部のランプが点灯し、運転が始まります。
- マッサージしているボタンを再度押すと、マッサージが停止します。

手動

本体操作部

手動

- 手動選択ボタンを押すごとに運転が矢印のように切り換わり、本体操作部のランプで表示します。

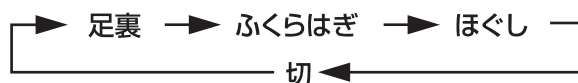

足裏	足裏・足の側面をマッサージ します。(約15分)
ふくらはぎ	ふくらはぎをマッサージ します。(約15分)
ほぐし	足の側面・ふくらはぎを マッサージします。(約15分)

リモコン

(足裏) (ふくらはぎ) (ほぐし)

- お好みの手動選択ボタンを押すと本体操作部のランプが点灯し、運転が始まります。
- マッサージしているボタンを再度押すと、マッサージが停止します。

使いかた (つづき)

5 マッサージの強さ、足裏指圧部の位置を調節します。

強さ調節

本体操作部

強さ

- 強さ調節ボタンを押すごとにマッサージの強さが矢印のように切り換わり、本体操作部のランプで表示します。



リモコン

弱


中

強

- お好みの強さ調節ボタンを押すとマッサージの強さが切り換わり、本体操作部のランプで表示します。

足裏指圧位置調節 ※手動運転のときに調節できます。

- 前ボタンを押している間、足裏指圧部が前に移動します。
- 後ボタンを押している間、足裏指圧部が後に移動します。

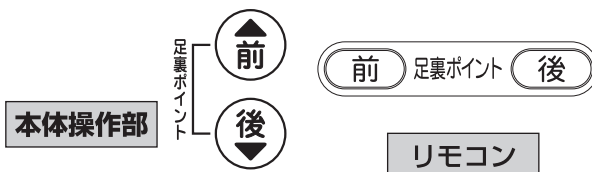


■ タイマーがはたらき、マッサージが自動的に終わります。

- 約15分（クイックコースは約5分）経過すると足裏指圧部がつま先の位置に移動して停止します。（「ピー」とアラームが鳴り、移動が終わると本体操作部のランプは全て消灯します）
マッサージが終わると、同時にヒーターも切れます。

マッサージを途中でやめたいときは

- 運転入／切ボタンを押すと、足裏指圧部がつま先の位置に移動して停止します。
（移動中はふくらはぎランプが点滅し、移動が終わると本体操作部のランプは全て消灯します。移動中は、非常時停止ボタン以外のボタンは受け付けません。）

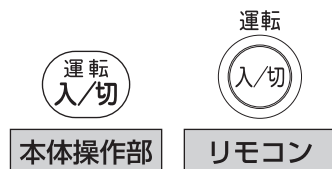

身体に異常を感じたり、非常事態がおこったときは

- 非常時停止ボタンを押すと、その場でマッサージが停止し、本体操作部のランプは全て消灯します。
- 再度、運転するときは9ページの1から操作し直してください。



安全装置がはたらいたときは

- 足裏指圧部に無理な力がかかると、運転が停止します。（ふくらはぎランプが点滅し、強・弱ランプが点灯）そのときは電源プラグをコンセントから抜き、3秒以上経過してから電源プラグをコンセントに差し込んでください。再度ご使用になれます。

マッサージ中の刺激が強く感じたときや痛いと感じたときは、
足と本体のマッサージ部との間にタオルを挟み、マッサージの刺激をやわらげてください。

マッサージが終わったら



警告

使用後は必ず運転を切り、リクライニングを戻し、マッサージ部をロック状態にしてください。




注意

長期間で使用にならないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

■ リクライニングを戻し、
マッサージ部をロック状態に
します。

7
ページ

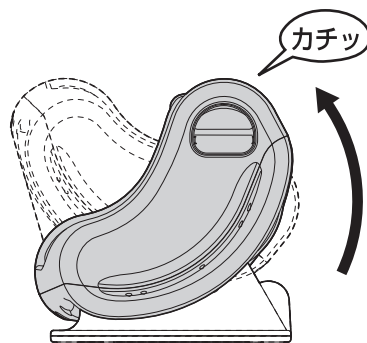

- お願い**
- 「カチッ」と音になるまで、
リクライニングを戻してください。
マッサージ部は、ロック状態になります。


お手入れのしかた



警告


お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
また、ぬれた手で抜き差ししないでください。

1 うすめた台所用中性洗剤にやわらかい布を
ひたして、よく絞ってください。

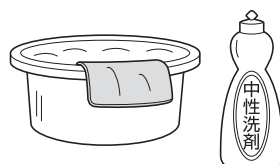

2 本体をふき、最後にからぶきをしてください。

- お願い**
- お手入れにはベンジン、シンナー、アルカリ性洗剤、
漂白剤などは使用しないでください。
変色、変形、割れの原因になります。

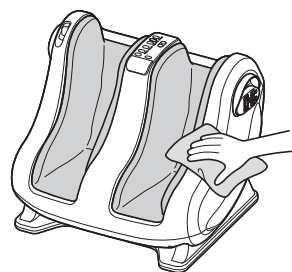

故障かな？と思ったら



警告

- 次の点検をしていただき、それでもなお異常のあるときは事故防止のため使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜いてお買い上げの販売店にご相談ください。
- ご家庭での修理は危険ですからおやめください。

症 状	調べるところ	直しかた
運転時の音 ・ エアーマッサージの音 ブシュッ音、カチ音（切替弁の音） シュー音、スー音（排気音） ブー音（ポンプの動作音） パコ音、ミシッミシッ音 （エアバッグがふくらむときの音） ・ 指圧動作音、足裏指圧部の前後切替え動作音（コン音） ・ 足裏指圧部の前後移動時の音 （ウィーンウィーン音、シュルシュル音）	• 構造上やむをえず発生するもので機能等には影響ありません。	
運転しない	• 電源プラグがコンセントにしっかり差し込まれていますか。	• 電源プラグをコンセントにしっかり差し込んでください。 7 ページ
リモコンで動作しない	• 電池が消耗していませんか。	• 電池を交換してください。 6 ページ
	• 電池の入れかた（⊕ ⊖ 方向）が間違っていないですか。	• 電池を入れ直してください。 6 ページ
	• リモコンの送信部を指でふさいでいませんか。	• リモコンの送信部を指でふさがないようにしてください。 8 ページ
	• リモコンの送信部が本体受信部に向いていますか。	• リモコンの送信部を本体受信部に向けてください。 8 ページ
	• リモコンの送信部や本体受信部の間に障害物はありませんか。	• 障害物を取り除いてください。 8 ページ
途中で運転が停止した	• タイマーのはたらきによるもので故障ではありません。	
	• 足裏指圧部に無理な力がかかっていませんか。（ふくらはぎランプが点滅し、強・弱ランプが点灯）	• 本体の安全装置が働いています。 11 ページ
足裏が温かく感じられない	• 冬場など室温が低い場合は、温くなるまでに時間がかかったり、温かく感じられないことがあります。 マッサージ前に予熱することをおすすめします。	9 ページ

仕 様

■取扱説明書には商品の色記号の表示を省略しています。
 包装箱に表示している品番の（ ）内の記号が色記号です。

販 売 名	フットマッサージャー HER-FA501
医 療 機 器 認 証 番 号	220ABBZX00345000
類 別	機械器具 77 バイブレーター
一 般 的 名 称	家庭用電気マッサージ器 (JMDNコード 34662000)
医 療 機 器 分 類	管理医療機器
使用目的、効能または効果	あんま、マッサージの代用とし、一般家庭でのマッサージに使用する
製 造 販 売 業 者	三洋電機コンシューマエレクトロニクス株式会社 兵庫県加西市鎮岩町194番地の4
製 造 業 者	Ningbo Comfort Health Equipment Co., Ltd. (中国)

電 源	AC100V 50-60Hz 共用
消 費 電 力	89W
電熱装置の定格消費電力	36W
定 格 時 間	30分
タ イ マ ー	自動コース：約15分（但し、クイックコースは約5分） 手 動：約15分
寸 法	幅550×奥行445×高さ435mm
質 量	約12.0kg
布 地 の 材 質	ポリエステル
コ ー ド の 長 さ	2m
エ ア ー 圧 力	弱：約32kPa 中：約38kPa 強：約40kPa ※部位によって若干の違いがあります。

保証とアフターサービス (必ずお読みください。)

保証書	補修用性能部品の 保有期間	ご不明な点や修理に 関するご相談は
●この商品には保証書を別途添付しております。 ●保証書は販売店でお渡しいたしますから所定事項の記入および記載内容をご確認いただき大切に保管してください。 保証期間 お買い上げ日より1年間です。	●当社は、このフットマッサーの機能を維持するために必要な補修用性能部品を製造打ち切り後、6年間保有しています。	●修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買い上げの販売店またはお近くの「お客さまご相談窓口」(別紙)にお問い合わせください。

修理を依頼されるときは	持込修理			
●13ページ(故障かな?と思ったら)に従って調べていただき、なお異常のあるときは、ご使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。				
保証期間中は 修理に際しましては保証書をご提示ください。保証書の規定に従って販売店が修理させていただきます。				
保証期間が過ぎているときは 修理すれば使用できる場合は、ご希望により有料で修理させていただきます。				
お客さま メモ	お買い上げ日	年	月	日
	お買い上げ 販売店名	TEL () -		

愛情点検	長年ご使用のフットマッサーの点検を！
	こんな症状はありませんか ●スイッチを入れても、ときどき運転しないことがある。 ●コードを折り曲げると、通電したり、しなかったりする。 ●運転中、異常な音をする。 ●本体が変形していたり、異常に熱い。 ●こげくさい臭いがする。●その他の異常・故障がある。 こんなときは 使用を中止してください。 故障や事故防止のため、電源プラグを抜いて、必ず販売店に点検をご相談ください。

三洋電機株式会社
三洋電機コンシューマエレクトロニクス株式会社
家電事業部
〒675-2332 兵庫県加西市鎮岩町194番地の4